
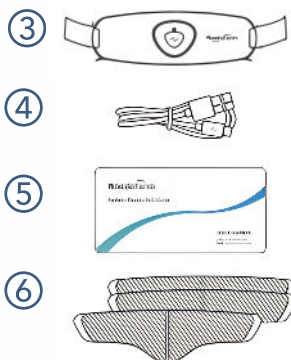


מדריך להתחלה מהירה

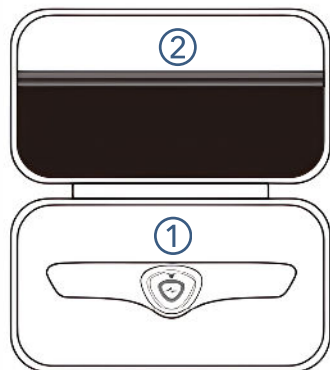

תכולת האריזה

- 1- מכשיר HeadTerm 2
- 2- נרתיק אחסון נייד
- 3- רצועת קיבוע לראש
- 4- כבל טעינה USB-C
- 5- מדריך למשתמש
- 6- אלקטרודות רב-פעמיות


הוראות שימוש

2. הסירו את כיסוי המגן השקוף ממשטח האלקטרודה.

1. נקו את המצח במים ובסבון וייבשו היטב לפני השימוש במכשיר.
כך האלקטרודה תיצמד היטב למצח.




מיקום הפוך של האלקטרודה

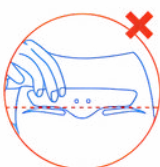

מיקום נמוך מדי, סמוך לגבות

3. היעזרו במראה והצמידו את הצד הדביק של האלקטרודה למרכז המצח

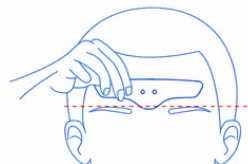

5.1. לחצו והחזיקו את הכפתור למשך 2 שניות כדי להפעיל את המכשיר.

4. חברו את המכשיר לאלקטרודה באמצעות החיבור המגנטי




לנוחות וליציבות רבה יותר, אפשר להשתמש גם ברצועת הראש




הוראות הפעלה

5.2. לחיצה אחת על הכפתור מעלה את העוצמה בדרגה אחת

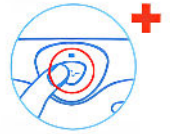

לחיצה כפולה על הכפתור מורידה אותה בדרגה אחת

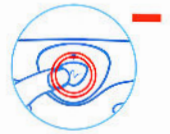

5.3. בחרו את דרגת העוצמה הנוחה לכם, מתוך תשע דרגות



זרם חלש מדי




זרם חזק מדי

הסרת המכשיר

5.4. בסיום הטיפול הנמשך 60 דקות, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי.


לכיבוי ידני, לחצו והחזיקו את הכפתור למשך 2 שניות.

6.1. הסירו את המכשיר מהאלקטרודה.

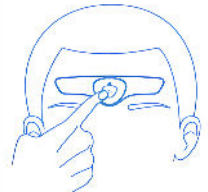

7. הסירו בעדינות את האלקטרודה מהמצח והחזירו את כיסוי המגן השקוף למקומו על האלקטרודה.

6.2. הסירו בעדינות את האלקטרודה מהמצח והחזירו את כיסוי המגן השקוף למקומו על האלקטרודה.

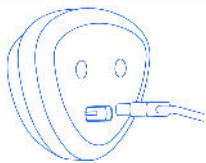

התוויות נגד לשימוש

המכשיר מיועד לבני 18 ומעלה בלבד.

אין להשתמש ב-2 HeadoTerm במקרים הבאים:

- שתל מתכתי או אלקטרוני במוח, או דפיברילטור מושתל או לביש.
 - דלקת חריפה, נטייה לדימומים, הפרעות בקצב הלב או אפילפסיה.
 - חבלה במוח, בראש או באזור הפנים והלסת, ובייחוד לאחר חבלה שאירעה לאחרונה.
 - גידול מוחי, דלקת קרום המוח או שבץ מוחי חריף.
 - כאב או אי-נוחות ממקור שאינו ידוע.
 - פצע פתוח, נפיחות, זיהום, דלקת, פריחה או רגישות לחומרי האלקטרודה באזור המצח.
- יש לקרוא את מדריך המשתמש המצורף לפני השימוש הראשון. המידע בעמוד זה אינו מחליף את הוראות היצרן או ייעוץ רפואי



ניתן לצפות בגרסה הדיגיטלית של המדריך ובסרטון ההדרכה דרך הקישור: www.alphamed.co.il/guides או על ידי סריקת הקוד: